



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# SonicPulsar

Электрическая звуковая зубная щетка  
**CS Medica SonicPulsar CS-131**



**Благодарим Вас за приобретение зубной щетки SonicPulsar CS-131.**

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией до начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в настоящем руководстве по эксплуатации. При покупке требуйте правильного его заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.

## 1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



### Предупреждение:

Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к серьезной травме.

- Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием устройства, если к Вам относится что-либо из нижеследующего:
  - чувствительные зубы или десны;
  - недавно перенесенная периодонтальная или стоматологическая хирургическая операция;
  - прохождение курса лечения, связанного с проблемами в ротовой полости.

- Прекратите использовать устройство и проконсультируйтесь со своим стоматологом, если у Вас наблюдается сильная кровоточивость десен после недели пользования данной зубной щеткой.

- Считается, что абразивные вещества, содержащиеся в зубной пасте для удаления пятен от табака или отбеливания зубов, могут серьезно повредить эмаль в случае их продолжительного использования. Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед тем, как начать использование зубных паст с повышенным содержанием абразивных веществ.

- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

- Храните щетку в недоступном для детей месте.

- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.

- Дети должны использовать зубную щетку под присмотром взрослых.

### Соблюдайте следующие правила обращения с USB кабелем:

- Не повреждайте и не обрывайте провод.

- Не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте провод.

- Не вносите изменения в конструкцию USB кабеля.

- Не кладите тяжелые предметы на USB кабель.

- Не используйте USB кабель с поврежденным проводом и адаптер с поврежденной вилкой. Не пользуйтесь разболтанным гнездом питания.

- Не подключайте зубную щетку для подзарядки к электрической розетке или к разъему USB мокрыми руками.

- Не отсоединяйте USB кабель от зубной щетки, пока он подключен к электрической розетке или USB разъему.

- Не допускайте попадания воды на USB кабель и адаптер.



### Внимание:

Указывает на потенциально опасную ситуацию, развитие которой может привести к незначительной травме, травме средней тяжести или порче имущества.

- Данное устройство предназначено только для ухода за полостью рта человека в домашних условиях.

- Зубная щетка является предметом личной гигиены и должна использоваться индивидуально.

- Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам слишком сильно и не касайтесь их никакими другими пластиковыми деталями щетки, кроме щетины. Не чистите одну область в течение продолжительного времени.

- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвергайте сильному ударному воздействию.

- Нажимайте на кнопку подушечкой пальца, а не ногтем, чтобы не повредить поверхность щетки.

## 2. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



Дополнительно можно приобрести:  
Насадки CS Medica SP-12 для электрической звуковой зубной щетки CS-131 (В комплекте 2 насадки).


## 3. ПОДЗАРЯДКА

Перед тем, как использовать щетку в первый раз, зарядите батарею до максимального уровня не менее 10 часов (без перерывов).

Особенностью CS-131 является то, что для подзарядки на корпусе щетки находится mini USB разъем, а комплект поставки включает USB кабель и адаптер переменного тока. Таким образом, Вы можете выбрать один из следующих способов подзарядки:


### 1. От электросети 220 В

Соедините USB кабель с адаптером переменного тока. После этого подсоедините USB кабель к разъему на корпусе щетки и подключите адаптер к электрической сети 220 В.

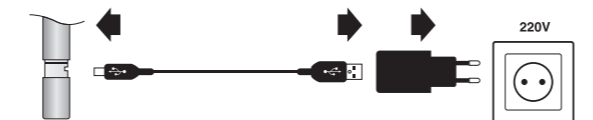

### 2. От USB разъема компьютера

Подсоедините USB кабель с одной стороны к разъему на корпусе щетки, а с другой к USB разъему компьютера.

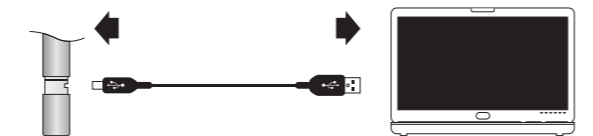

Чтобы открыть отсек с mini-USB разъемом, поверните крышку отсека против часовой стрелки до совмещения отметки на задней стороне отсека и левой риски на рукоятке. После этого слегка сдвиньте крышку вниз.

### Примечание:

- Крышка с рукоятки полностью не снимается.

Чтобы закрыть отсек с mini-USB, прижмите крышку отсека к рукоятке и поверните крышку по часовой стрелке до совмещения отметки на задней стороне отсека и правой риски на рукоятке.

### Примечание:


- Если отсек с mini-USB закрыт неплотно, в корпус устройства может попасть вода и вызвать нарушения в работе зубной щетки.

### Примечание:

- Во время подзарядки зубной щетки индикатор подзарядки постоянно горит.

- Во время подзарядки включить питание главного устройства не удастся.

## 4. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДКИ

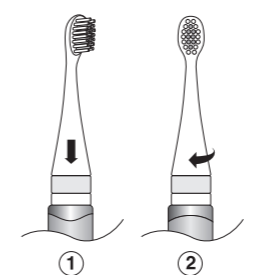

Установите насадку на рукоятку совмещая направляющие на насадке и рукоятке. Зафиксируйте насадку на рукоятке, повернув ее до упора по часовой стреле, как показано на рисунке. Для того чтобы снять насадку, необходимо проделать те же действия в обратном порядке.

### Примечание:

Не прилагайте излишних усилий при установке насадки. Это может привести к повреждению устройства.

## 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Смочите щетку водой и выдавите на нее немного зубной пасты. После этого введите щетку в ротовую полость.


### Примечание:

Чтобы предотвратить разбрызгивание зубной пасты, включайте и выключайте зубную щетку только при ее нахождении во рту.

- Включите питание, нажав на кнопку.

Головка щетки начинает вибрировать. Аккуратно касайтесь зубов и десен щетинками, медленно перемещая головку щетки по зубам в горизонтальном направлении, последовательно проводя чистку всей поверхности зубов.

- Нажатием на кнопку Вы можете выбрать один из двух режимов чистки. Выберете наиболее подходящий в данный момент режим.

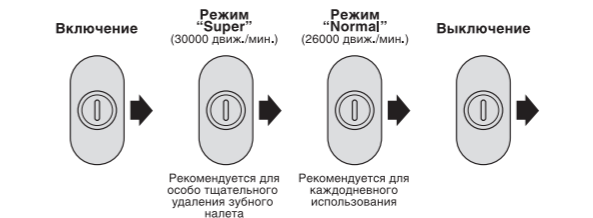

### Примечание:

Выборный режим чистки не определяется визуально.


### Автоматическое отключение через 2 минуты

Щетка отключается через 2 минуты. При необходимости Вы можете продолжить чистку, снова включив питание щетки.

### Промежуточный таймер каждые 30 секунд

Щетка делает на мгновение паузу каждые 30 секунд, что ориентирует Вас на равномерную очистку всех участков полости рта.

### Правильная чистка зубов:

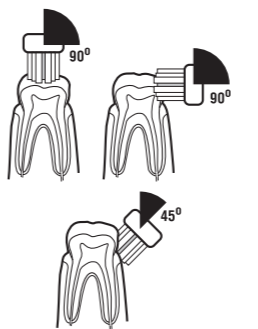

### Поверхность зуба и окклюзионная поверхность:

Во время чистки держите щетину под углом 90° к поверхности зуба.

### Граница между зубами и десной:

Во время чистки держите щетину под углом 45° к поверхности зуба.



### Задняя сторона резцов или область неровно расположенных зубов:

Вертикально прижимайте головку щетки к зубу и очищайте их по очереди, учитывая угол расположения зубов.

- Завершив чистку зубов, не вынимая щетку изо рта, нажмите на кнопку Вкл/Выкл, чтобы выключить зубную щетку.

- Промойте головку щетки под проточной водой. Аккуратно стряхните излишек воды.

- Если требуется, установите зубную щетку на подставку и закройте насадку защитным колпачком.

## 6. УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Держите зубную щетку в чистоте.

- Удаляйте загрязнения мягкой сухой тканью. При необходимости смачивайте ткань в воде или мягком моющем средстве. Загрязненную поверхность также можно смочить водой, а затем протереть тканью.

- Несмотря на то, что щетка является водонепроницаемой, не погружайте ее в воду на длительное время.

- Не используйте для очистки летучие органические соединения, такие как бензин и растворитель. Это может испортить нанесенную краску или привести к повреждению устройства.

- После каждого использования промывайте щетину водой.

- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не роняйте ее и не подвергайте сильному ударному воздействию.

- Храните щетку в недоступном для детей месте.

- Храните щетку вдали от огня, высоких температур и прямых солнечных лучей.

- Заменяйте насадку для щетки не реже одного раза в три месяца.

### Примечание:

Не допускайте попадания воды на USB кабель и адаптер переменного тока. Они не являются водонепроницаемыми.

## 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Электрическая звуковая зубная щетка
Модель	CS Medica SonicPulsar CS-131
Электрические параметры	DC 5В 500 мА, AC 100-240 В, ~ 50 Гц
Потребляемая мощность	рабочая: 0,3 Вт при зарядке: 0,35 Вт
Источник питания	через mini-USB разъем
Время, необходимое для полной подзарядки	около 10 часов
Способ подзарядки	Никель-металл-гидридная аккумуляторная батарея 1,2 В/ 600 мАч
Время работы после полной подзарядки	Около 45 дней (при условии, что щетка используется 2 раза в день по 2 минуты после полной подзарядки)
Частота колебаний при разных режимах работы	NORMAL: 26000 движ./мин. SUPER: 30000 движ./мин.
Рабочая температура / относительная влажность	0-50°C /30-85%
Температура / относительная влажность при хранении	-20-60°C /10-95%
Масса	45 г
Габаритные размеры	18 (диаметр) x 184 (высота) мм
Срок службы	Рукоятка—4 года. Насадка—3 месяца.
Комплект поставки	Рукоятка с насадкой, дополнительная насадка, защитный колпачок для насадки, USB кабель, адаптер переменного тока, подставка, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном



Степень защиты корпуса зубной щетки от проникновения твердых предметов и воды

Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза

